


NÅLESKJULER TIL BRUG MED HUMATROPE® CYLINDERAMPULLER

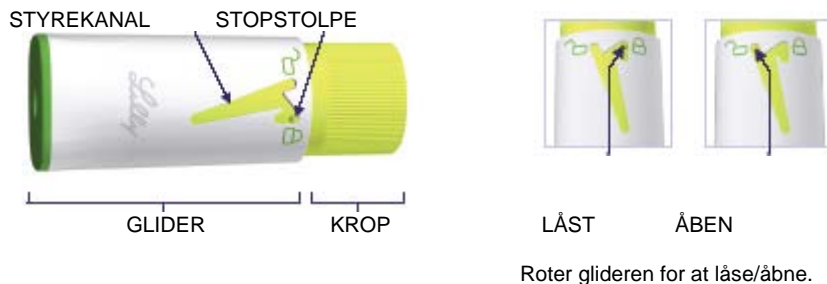

Lilly

BRUGSANVISNING FASTGØRELSE OG BRUG AF NÅLESKJULER

Nåleskjuleren giver dig den mulighed at indsprøjte uden, at du kan se nålen. Kontroller at pennens er klargjort ifølge pennens brugsanvisning.

Hvilke nåle kan bruges sammen med nåleskjuleren?

- Injektionsnåle medfølger ikke. Nåle kan fås på apoteket.
- BD-nåle (Becton, Dickinson and Company) er anbefalet til brug med HumatroPen.
- HumatroPen kan bruges med eller uden nåleskjuleren. Hvis nåleskjuleren bruges sammen med HumatroPen skal nålen være mindst 5 mm lang.
- Spørg din læge eller sygeplejerske, om hvilken nåletykkelse og længde, som passer bedst til dig.

1 Kontroller at pennens hætte er fjernet. Fastgør en ny nål, og fjern den ydre nålehætte og den indre nålehætte.

2 Kontroller at nåleskjuleren er i låst stilling. Hvis ikke, så lås nåleskjuleren ved at dreje (ikke skubbe) glideren indtil stopstolpen er i positionen i styrekanalen som vist.



LÅST

3 Indsæt en cylinderampul med fastgjort nål lige ind i nåleskjuleren, indtil den stopper. Drej pennen til din sædvanlige dosis. Vær forsigtig for at undgå nålestik.



4 Åben nåleskjuleren ved at rotere glideren med uret, indtil nåleskjuleren er i åben stilling med stopstolpen i styrekanalen som vist. Vær forsigtig og skub ikke glideren ind, efter den er åbnet, for at undgå nålestik.



ÅBEN

- 5** Indsprøjt din Humatropedosis, som din læge eller sygeplejerske har instrueret dig. Indsæt først nålen i en 90° vinkel ved at skubbe den ind i huden. Glideren vil flytte nåleskjuleren, når nålen indsættes. Tryk så på injektionsknappen. Nåleskjuleren vil automatisk låse, når du fjerner nålen fra huden.



- 6** Kontroller, at nåleskjuleren er vendt tilbage til den låste position. Træk forsigtigt nåleskjuleren lige af, og fjern den fra pennen.
- Fjern og kasser nålen, som din læge eller sygeplejerske har instrueret dig i.
- Sæt penhætten på igen.
- Snavsede dele kan renses med en fugtig klud. BRUG IKKE sprit eller andre rensedmidler.



CE
0344

Eli Lilly and Company
Pharmaceutical Delivery Systems
639 S Delaware St,
Lilly Corporate Center
Indianapolis, IN 46285, USA

Importør:
Lilly S.A
Avda. de la Industria 30
28108 Alcobendas, Madrid, Spanien

EC REP
Eli Lilly Nederland B.V.
Papendorpseweg 83
3528 BJ Utrecht
Holland

Humatrope® og HumatroPen® er varemærker som tilhører Eli Lilly and Company

Dato for seneste revision: April 2018

Copyright © 2008, 2018 Eli Lilly and Company. Alle rettigheder forbeholdes.